

Elektrooptični pojav

Samo Krejan

november 2025

1 Uvod

Za spektroskopijo z elektronsko spinsko resonanco se pogosto uporablja sinonim elektronske magnetne resonanse. Magnetna resonančna spektroskopija se imenuje, ker merimo prehod med energijskimi nivoji prostih elektronov v magnetnem polju. Princip delovanja je podoben kot pri jedrski magnetni resonanci, le da so frekvence mnogo višje. Pri nižjih frekvencah in odgovarjajočem magnetnem polju vseeno pride do zanimivih pojavov.

Elektron je delec s spinom $S = \frac{1}{2}$ in ima po klasični teoriji magnetni moment, katerega velikost je *Bohr magneton* $\mu_B = e\hbar/2m_e = 9.2710^{-24}\text{J/T}$. V zunanjem magnetnem polju imamo dve možnosti projekcije vrtilne količine. Vzporedno z magnetnim poljem B_0 , kjer je magnetno kvantno število $m_s = \frac{1}{2}$ in nasprotno s poljem $m_s = -\frac{1}{2}$. Med temo stanjema je energijska razlika ΔE :

$$\Delta E = E_{\text{up}} - E_{\text{down}} = g\mu_B B_0$$

kjer je g Landejev faktor in je za prost elektron (z upoštevkom relativističnih popravkov) enak 2.0023192. Landejev faktor je odvisen tudi od kemične vezave in elektronskega okolja. Prehode med temo dvema nivojem lahko vzbujamo z elektromagnetnih sevanjem, ki je dovolj energetično, ai. izpolnjuje pogoje

$$\Delta E = g\mu_B B_0 = h\nu$$

Tako smo dobili zvezo med frekvenco in resonančno vrednostjo magnetnega polja. Energijska razlika ΔE je relativno majhna v primerjavi z vidno ali IR spektroskopijo, zato so signali precej šibki. Relativno populacijo obeh energijskih nivojev podaja Boltzmannova porazdelitev

$$\frac{n_2}{n_1} = e^{-\frac{\Delta E}{k_B T}} = e^{-\frac{h\nu}{k_B T}}$$

kjer je k_B Boltzmannova konstanta in T absolutna temperatura. Zaradi interakcij elektrona s kristalno mrežo, z drugimi elektroni ali jedri, resonančne črte niso ostre, ampak razširjene ali razcepljene.

1.1 Eksperiment

V našem primeru imamo vzorec **DPPH** (2, 2-diphenil-1-pikrilhidrazil), ki se nahaja v tuljavi resonančnega regenerativnega oscilatorja. Ko zunanje magnetno polje B_0 doseže vrednosti, ki izpoljuje resonančni pogoj, nastopi absorpcija visoko frekvenčnega valovanja in amplituda oscilacij oscilatorja pada. Oscilacije preko diode opazujem na osciloskopu.

Dodatno si olajšamo z modulacijo magnetnega polja. Amplituda modulacije je običajno manjša od širine črte, kar pomeni, da dobimo signal modulacijske, katerega amplituda je proporcionalna odvodu absorcipijske črte v odvisnosti od statične komponente polja.

Signal na osciloskopu je šibek in ne izstopa od šuma, zato uporabimo fazni detektor. Ta ima na voljo referenčni signal $U_{ref} = U_0 \cos(\omega t + \phi)$, kar je v našem primeru napetosti, ki napaja modulacijske tuljave. Signal $U_{sig} = A(t) \cos(\omega t)$ je usmerjen izhod regenerativnega oscilatorja delno prekrit s šumom in iste frekvence ω . Med njima je fazna razlika ϕ .

Fazni detektor napravi produkt obeh singalov kot analogni množilec

$$U_{out} = U_{ref} U_{sig} = \frac{1}{2} A(t) [\cos \phi + \cos(2\omega + \phi)]$$

S tem smo dosegli, da je nosilna frekvenca signala $A(t)$ enaka nič. Drugega člea pa se preprosto znebimo z RC filtrom.

2 Potrebščine

- vzorec
- refenerrativni oscilator
- osciloskop
- modulacijske tuljave in njihov napajalec
- fazni detektor

3 Naloge


- z vzorcem DPPH kot merjencem določi g faktor prostega elektrona in razmerje B/ν .
- izmeri širino absorcipijske črte

4 Meritve in izračuni

Diagonalo tuljave sem izračunal po formuli

$$d = \sqrt{l^2 + (r_1^2 + r_2^2)}$$

in dobil za izmerjene $r_1 = (4.5 \pm 0.1)\text{cm}$, $r_2 = (8.7 \pm 0.1)\text{cm}$ in dolžina tuljave $l = (13.2 \pm 0.1)\text{cm}$

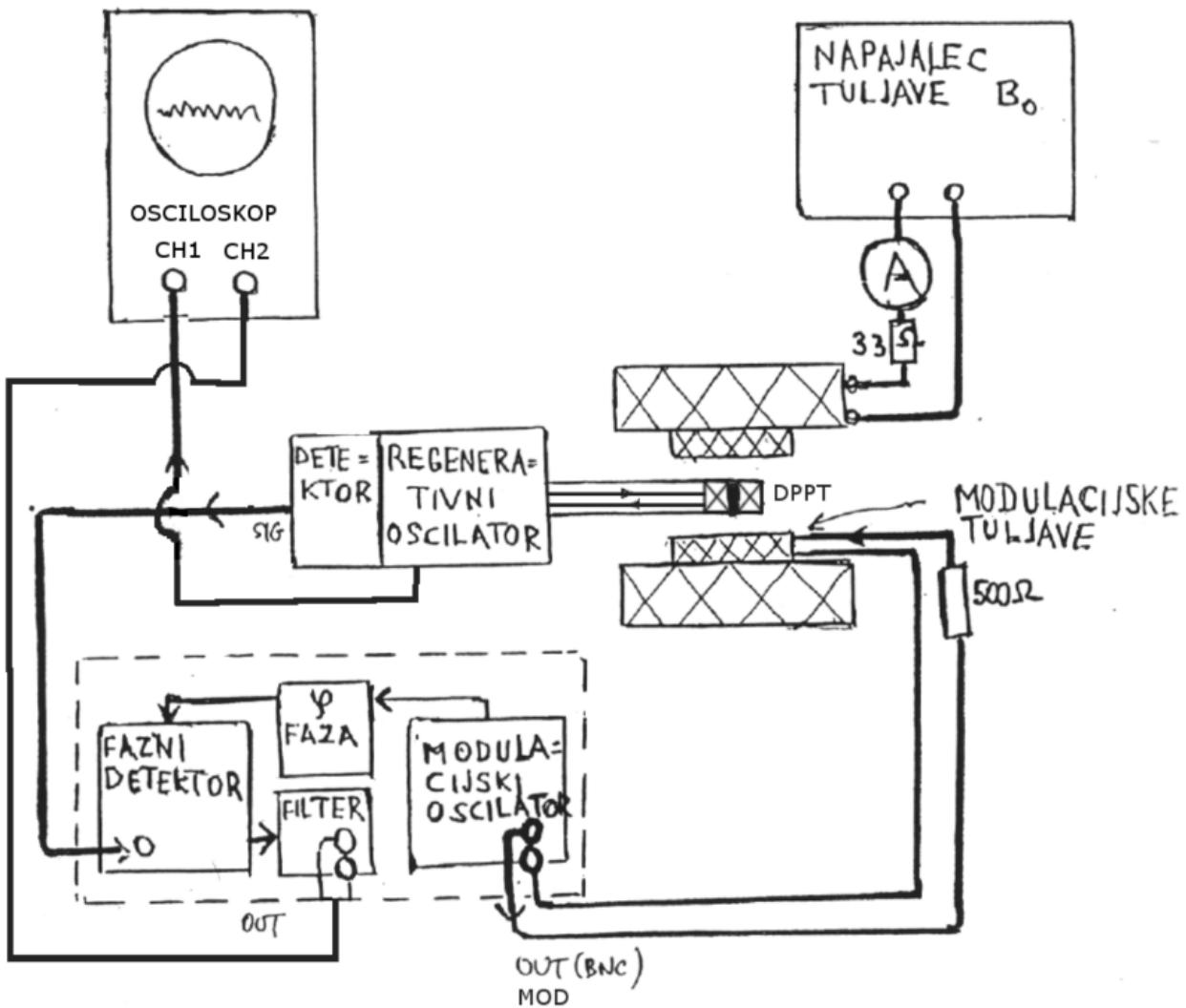

Slika 1: Shema eksperimenta

$$d = (18.6 \pm 0.1)\text{cm}$$


Prav tako g faktor izrazimo kot

$$g = \frac{h\nu}{\mu_B B_0}$$

Magnetno poljsko gostoto izrazimo z

$$B_0 = \frac{N\mu_0 I}{d} \quad (1)$$

Izmeril in naredil sem grafe odvoda absorpcijske črte pri 80, 85, 90 MHz.

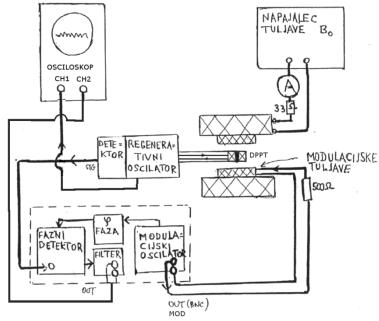

Slika 2: Graf prikazuje odvod absorpcijske črte za 3 frekvence: 80, 85, 90 MHz.

Za B_0 sem vzel vrednost toka, ki je označena z \times na grafu in je točka, kjer naj bi bila napetost med maksimumom in minimumom enaka 0. Preko enačbe 1 sem dobil vrednosti

$$B_{080} = (2.86 \pm 0.02) \text{ mT}$$

$$B_{085} = (3.04 \pm 0.02) \text{ mT}$$

$$B_{090} = (3.23 \pm 0.02) \text{ mT}$$

Za razdalja med ekstremoma sem odčital in izračunal preko enačbe 1 sem dobil

$$\Delta B_{80} = (0.12 \pm 0.01) \text{ mT}$$

$$\Delta B_{85} = (0.13 \pm 0.02) \text{ mT}$$


$$\Delta B_{90} = (0.14 \pm 0.01) \text{ mT}$$

Razmerje ν/B_0 pa je enako

$$\left(\frac{\nu}{B_0} \right)_{80} = (27.8 \pm 0.2) \frac{\text{GHz}}{\text{T}}$$

$$\left(\frac{\nu}{B_0} \right)_{85} = (27.9 \pm 0.2) \frac{\text{GHz}}{\text{T}}$$

$$\left(\frac{\nu}{B_0} \right)_{90} = (27.8 \pm 0.2) \frac{\text{GHz}}{\text{T}}$$

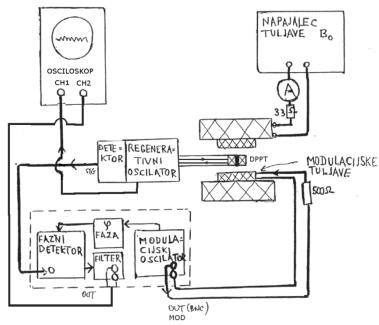

Slika 3: Graf prikazuje regresijo premice, katere vrednost nam poda faktor g .

Za g vrednost sem regresiral premico na dane podatke in iz grafa 3 dobil vrednost

$$g = 1.96 \pm 0.04$$